



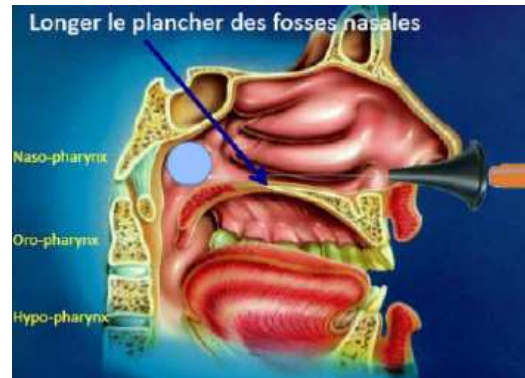

## Avant d'effectuer le prélèvement :

- Informer le patient des modalités du geste,
- Demander au patient de revêtir un masque chirurgical,
- Effectuer une hygiène des mains par solution hydroalcoolique,
- Mettre des gants, un masque de type FFP2, des lunettes, et protéger sa tenue par une surblouse manches longues, et une protection des cheveux (charlotte).

## Prélèvement nasopharyngé par écouvillonnage profond (endonasal)

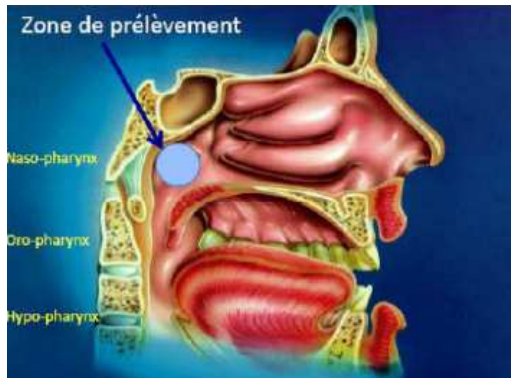

- Patient assis, dos contre le dossier du siège, inclinaison de la tête en arrière, se positionner de côté et non face au patient,
- Repérer la longueur à introduire dans la narine : distance nez-tragus,
- Soulever la pointe du nez pour dégager l'orifice narinaire,
- Tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige et l'insérer perpendiculairement au plan de la face,
- Longer le plancher de la fosse nasale jusqu'au repère,
- Tourner l'écouvillon avant le retrait de façon à détacher le plus possible de cellules,
- Décharger l'écouvillon dans le milieu de transport fourni,
- Avec LE MÊME écouvillon, refaire le même geste dans l'autre narine,
- Puis casser l'écouvillon dans le milieu de transport,
- Bien fermer et identifier le tube avec le nom de naissance, prénom, nom d'usage, date de naissance et sexe du patient.

Consulter au besoin les vidéos/tutoriels du prélèvement nasopharyngé sur Internet :

- CHU de Bordeaux & RéPias : <https://www.preventioninfection.fr/actualites/video-tutoriel-de-techniques-de-prelevement-de-covid-19/>
- SDB – New England Journal of Medicine : <https://youtu.be/RW3aa0Yd2oI>

- Eliminer les équipements de protection individuelle (EPI) en emballage fermé,
- Les lunettes devront être désinfectées (virucides),
- Effectuer une hygiène des mains (SHA).

Le prélèvement doit être **conditionné dans le triple emballage** souple fourni avec le tube, puis adressé directement au laboratoire de biologie médicale; il peut être conservé à température ambiante si le délai d'acheminement est inférieur à 24 h, sinon il doit être conservé au froid (5 +/- 3 °C).

Mettre cette fiche dûment complétée avec l'ordonnance  
**dans la poche externe**